



Yes, you can.®

➤ Invacare® **XPO₂**™

NOVEDAD

El oxígeno que necesita esté donde esté

Invacare® **XPO₂**™ es un verdadero concentrador portátil, ideal para pacientes oxígeno-dependientes, activos y que desean viajar, porque ahora podrán escoger cuando, donde y como hacerlo. El envío eficiente de oxígeno clínico, mediante un sistema de dosis por pulso, mantendrá oxigenado hasta al paciente más exigente.

El **XPO₂**™ tiene un diseño con estilo y ofrece una placa de utilización simple, y todo esto en un equipo, compacto, ligero pero robusto.





XPO₂™ y **Perfecto₂**™ - la solución completa para el paciente.

➤ **Increíblemente portátil para proporcionar independencia al usuario**

Compacto y ligero, el *Invacare*® **XPO₂**™ anima a aquellos usuarios ambulatorios a aprovechar al máximo de su independencia. Con solo 2.9 kg el **XPO₂**™ cambia el concepto de concentrador portátil. La habilidad para operar y cargar desde cualquier salida AC o DC en vehículos, brinda la libertad que con las formas tradicionales de oxígeno ambulatorio no estaban permitidas.

Las baterías adicionales para el **XPO₂**™ ofrecen mucho tiempo adicional sin necesidad de acudir a un punto de recarga. Con cada batería adicional se añade 2,5* horas de autonomía.

* Tiempo aproximado en posición 2 a 20bpm.


➤ **Entrega de oxígeno clínico por pulso**

Los beneficios de la saturación de oxígeno por el dispositivo patentado de "entrega en dosis por pulso no-lineal" en el **XPO₂**™, éste ha sido diseñado para imitar el volumen que entrega un dispositivo de flujo continuo. El dispositivo entrega únicamente el oxígeno clínico al inicio de la inspiración permitiendo el intercambio de gas en su punto máximo. Con una producción de 900ml de oxígeno, de alta pureza, alta sensibilidad del disparador, respuesta rápida y eficiente entrega en cantidad y calidad, **XPO₂**™ asegura a los paciente permanecer oxigenados permanentemente.

XPO₂™ produce oxígeno terapéutico para pacientes con un máximo de 35 respiraciones por minuto en todas las posiciones. Las posiciones de dosis por pulso desde 1 a 5 permiten al **XPO₂**™ satisfacer las demandas de un gran número de pacientes.

➤ **La tecnología Invacare® presenta al perfecto compañero ambulatorio**

XPO₂™ de *Invacare*® es el perfecto compañero para reducir el costo del oxígeno ambulatorio, conservando el más alto nivel de servicio. Verdadera portabilidad y elevada eficiencia clínica, junto con su sencilla utilización, brinda a los pacientes la confianza y la libertad de viajar. *Invacare*® ofrece la solución perfecta para deambulación tanto para pacientes como para proveedores.

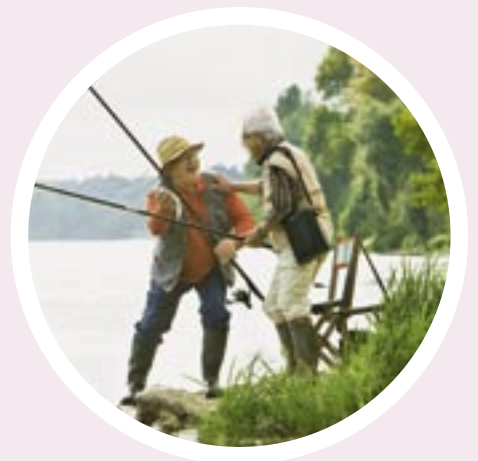

Opciones y características



Fácil utilización



Aumento de independencia

Es posible duplicar la autonomía con una batería adicional de 5 horas en posición 2 a 20bpm.



Compacto y ligero

Pequeño y discreto promueve la movilidad, viajes e independencia.



Eficiente clínicamente

Entrega oxígeno en la primera fase de la inhalación para un efectivo intercambio de gas.



Realmente portátil

Únicamente 2.9 kg promueven la deambulación.



Rendimiento

Permite mantener oxigenado al paciente gracias a una larga y eficiente entrega por pulsaciones.

Accesorios



Ligeros y robustos accesorios de viaje



Filtro y contador horario



Accesorios

- Adaptador AC
- Adaptador vehículo DC
- Batería adicional
- Bolsa de transporte

Información del modelo

XPO100 – Incluye **XPO₂**™ concentrador portátil, bolsa de transporte, adaptador AC, adaptador DC, manual de usuario, Información en DVD y accesorio de bolsa de transporte

XPO100B – Incluye **XPO100** y batería adicional.

Información técnica

Rendimiento

Flujo de Oxígeno

Concentración de Oxígeno

Duración batería

Tiempo de recarga

Altitud de operación

Capacidad máxima

Garantía limitada - concentrador

Garantía limitada - batería y accesorios

Dosis por pulso, posiciones 1-5

87% - 95.6% en todas las posiciones

2,5 horas en posición 2, batería interna

2,5 horas en posición 2, batería adicional

3 horas*


hasta 3046mt(10.000 ft) sobre el nivel del mar

900ml por minuto


5 años

1 año


* tiempo de recarga incrementa si utiliza el concentrador mientras lo carga.

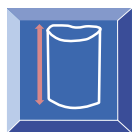

25 cm

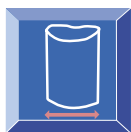

18 cm

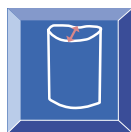

10 cm



concentrador, 2.9 kg
batería adicional, 0.7kg.



100-240 VAC,
60/60 Hz,
0.6 amp a 230 VAC



12-16 VDC, salida
3,3 amp a 18 VDC



Aprobado FAA

XPO₂™ cantidad de entrega de oxígeno:

Posición	Volumen promedio por pulso a 20bpm	Volumen promedio por pulso a 30bpm
1	15 ml	10 ml
2	23 ml	15 ml
3	31 ml	21 ml
4	37 ml	25 ml
5	42 ml	28 ml

Toda la información solicitada se supone correcta en el momento de la impresión.
Invacare® se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.



INVACARE® S.A.

C/ Areny s/n - Polígon Industrial de Celrà - 17460 Celrà (Girona)

Telf. (34) 972 49 32 00 - Fax : (34) 972 49 32 20

contactsp@invacare.com - www.invacare.es